

## 手持式匀浆机/电动组织匀浆机

手持式匀浆机适合于液体相互混合、乳化、均质，固体粉末在液体中的分散，动物组织的捣碎、匀浆。本机通过高速剪切、分散，产生强大的液力剪切效应，使物料从转子下端吸入，通过定子喷射，造型符合人体工程学，适合手持操作，可随意移动。最小处理量可至0.2ML，专为组织捣碎、医学诊断、质检检测、微量分散、乳化、均质而开发的匀浆机，是微量样品前处理的理想设备。


- ◆ 重量仅1KG，可手持操作，电机无极调速
- ◆ 转速高达35000RPM，7档等分可调
- ◆ SUS316L不锈钢均质刀头，可拆卸方便清洗
- ◆ 配有金属悬挂扣，暂停使用或结束使用可暂时悬挂于实验台
- ◆ 可选6MM/8MM/10MM三个刀头适配不同处理量（0.2~250ML）需求，适用于EP管、离心管等
- ◆ 可选配H型大支架，马蹄式设计，可调节大小/高低/角度，高效处理更便捷。

### 技术参数

型号	DH-S06	DH-S08	DH-S10
转速	5000~35000rpm		
转速调节	7档等分可调		
调速方式	无级调速		
金属悬挂扣	有		
定时时间	无		
标配刀头	6mm	8mm	10mm
参考处理量	0.2~50ml	50~150ml	100~250ml
最大速度	6m/s	8m/s	10m/s
可选刀头	6mm/8mm/10mm		
可选支架	H型大支架（可调节大小、高低、角度）		
功率	145W		
产品重量	1kg		
外型尺寸	185*55mm		
输入电源	110/220V		

\* 仪器配置：标配主机和一个刀头，H型大支架、其他刀头和破碎杯需选配。

## HAND HELD HOMOGENIZER 手持式匀浆机

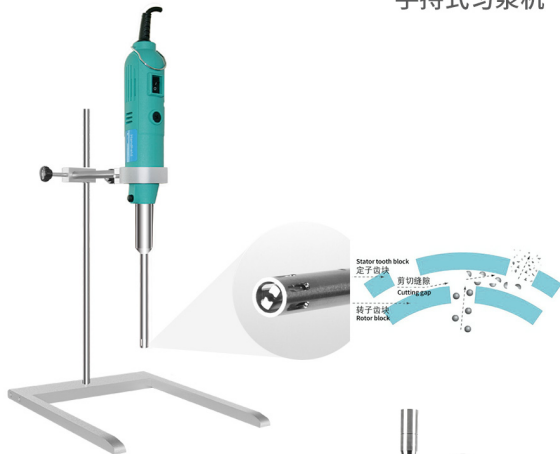

### 可选配件（H型支架/刀头）

型号	材质	参考处理量	外直径
6G	SUS316L	0.2~50ML	6MM
8G	SUS316L	50~150ML	8MM
10G	SUS316L	100~250ML	10MM

\* 分散头采用不锈钢材质，可重复使用，采用快速连接方式，便于拆卸更换/清洗。

可选H型大支架（可调节大小、高低、角度）。

